

**NÃO É SÓ UM EXAME!  
É CONTROLE  
E SEGURANÇA.  
É SAÚDE 4.0!**



**greiner BIO-ONE**  
**eTRACK**

Guia do usuário: Pacote Trial

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

- Após efetivar a assinatura no site [www.gboetrack.com.br](http://www.gboetrack.com.br)
- O responsável irá receber um e-mail contendo um link
- Clicar no link
- Digitar seu usuário e senha informados no e-mail
- No primeiro acesso será solicitado alteração e confirmação da senha
- Seguir este passo a passo para configurar usuários e unidades

MAIS CONTROLE  
E SEGURANÇA  
DA INFORMAÇÃO  
NA HORA DO EXAME.

*Configuração do Manager Cockpit*



greiner BIO-ONE  
eTRACK

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Barra do menu principal do Manager Cockpit

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



- Editar Perfil
- Alterar senha
- Sair

Para editar o perfil do usuário, alterar senha ou sair clique aqui

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

### Novo Usuário

Nome	Gestor GBO eTrack		
Função	Administrador de Matriz		
Código do País	55	Celular	19999999999
Email	silvio@gbo.com.etrack		
Laboratório	GBO Test Lab		

[Voltar](#) [Salvar](#)

Tela para editar o perfil do usuário

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para mudar o idioma clique aqui

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



O sistema possui quatro idiomas disponíveis



# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para criar ou editar usuários clique aqui

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

+ Novo Usuário

### Novo Usuário

Nome	<input type="text"/>		
Função	<input type="text"/>		
Código do País	<input type="text"/>	Celular	<input type="text"/>
Senha	<input type="text"/>	Redigitar a Senha	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		

Voltar

Salvar

Clicando no ícone “Novo Usuário” abre o acesso a tela de configuração

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

A screenshot of the user registration form in the greiner BIO-ONE eTRACK application. The form includes fields for 'Nome', 'Função', 'Código do País', and 'Senha'. A dropdown menu is open under the 'Função' field, showing three options: 'Administrador de Matriz', 'Administrador de Filial', and 'Operador'. The 'Senha' field has a 'Repetir a Senha' label next to it.

O sistema tem 3 tipos de função, sendo:

- Administrador de Matriz = Responsável pelo laboratório
- Administrador de Filial = Responsável pela unidade
- Operador = Usuário do APP no dispositivo para coleta



## IMPORTANTE!

Apenas o operador consegue acessar o APP com seu usuário e senha no dispositivo para o processo na operação.  
Os administradores apenas acessam o sistema Manager Cockpit na web.

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para configurar o laboratório e suas unidades clique aqui

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para acessar o dashboard e relatórios do laboratório e suas unidades clique aqui

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

Selecione o Laboratório

Visão Geral

A red oval highlights the dropdown menu area. A red arrow points from the text box below to the center of the oval.


Clique aqui para selecionar o laboratório e visualizar seu dashboard

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

### Manager Cockpit

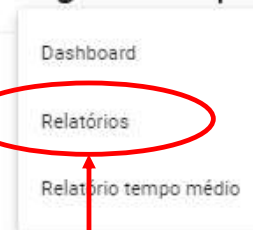



Clique aqui para selecionar e visualizar os relatórios do laboratório



# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

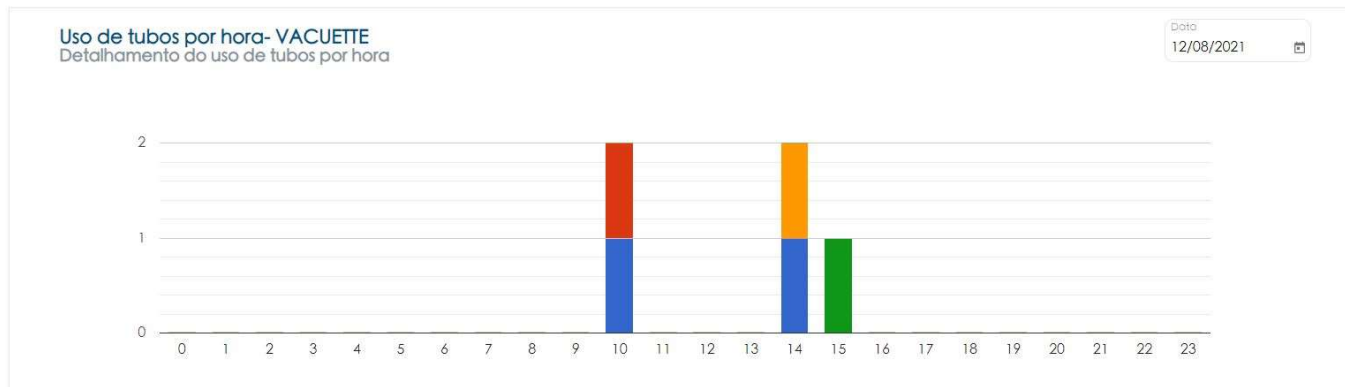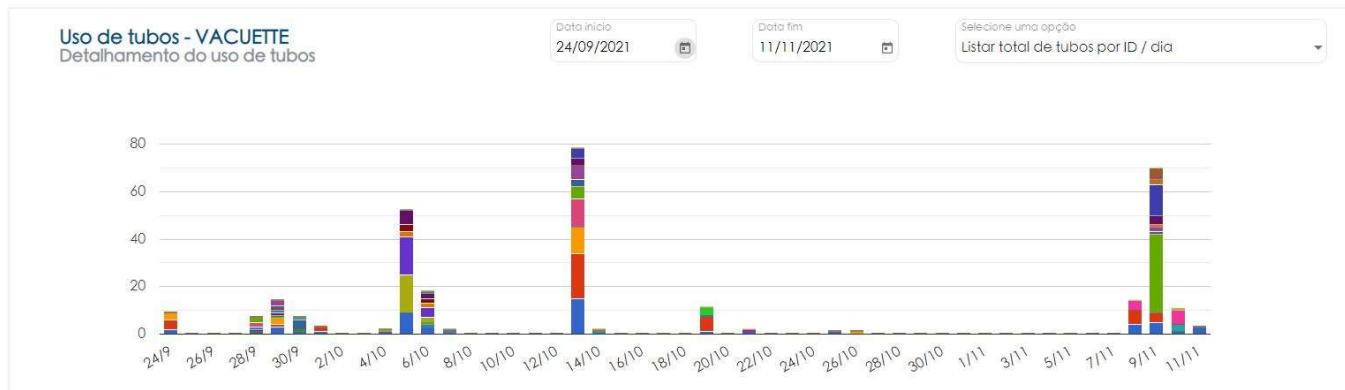


Gráficos indicando a quantidade de tubos utilizado por dia e por hora

# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

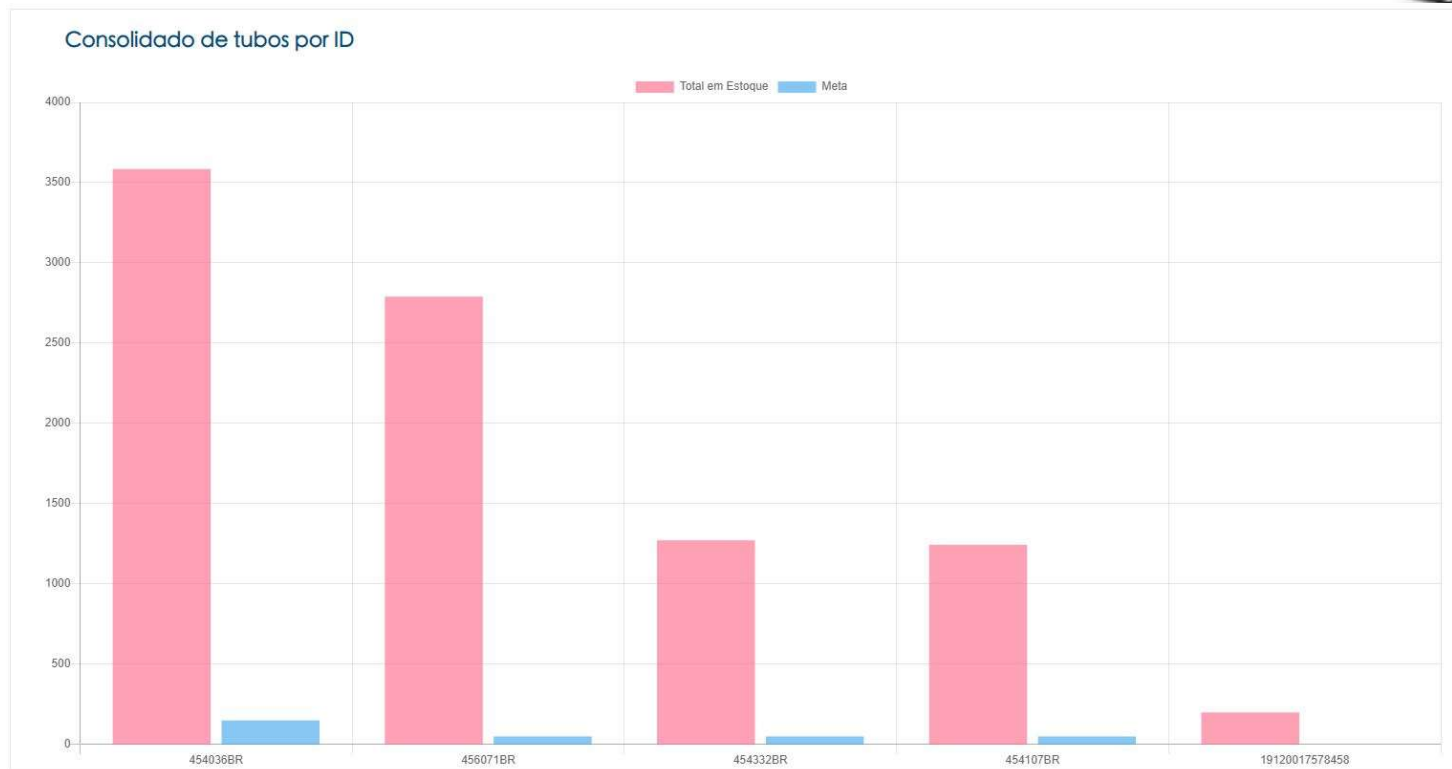

Gráficos para auxiliar a gestão visual do estoque

# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK


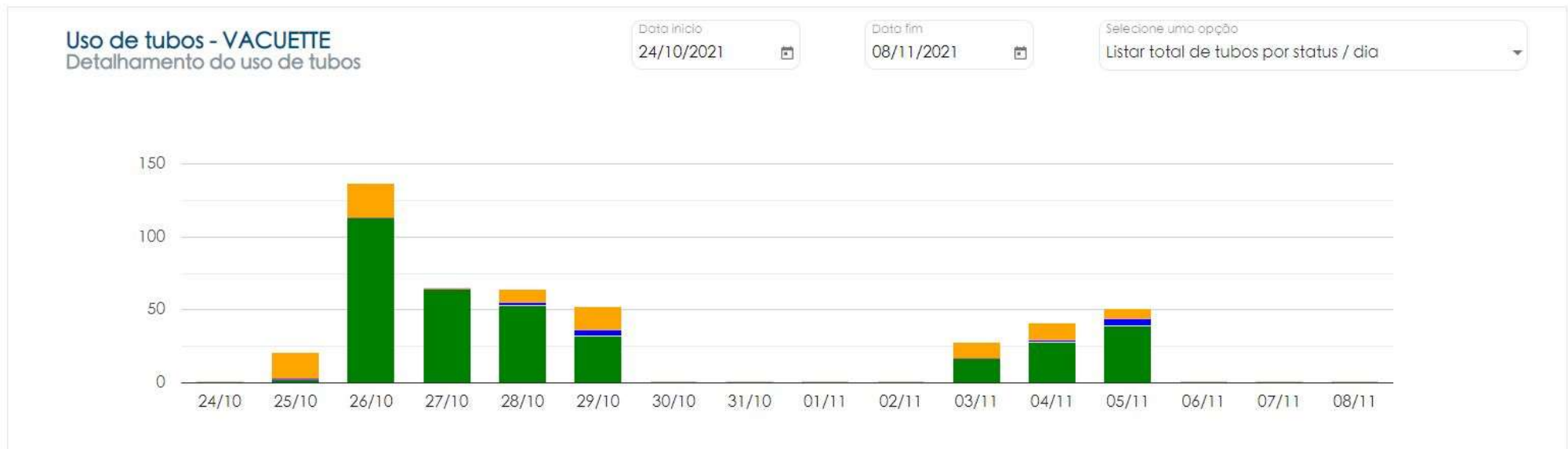


Gráfico indicando quantidade de descarte de Tubos

# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

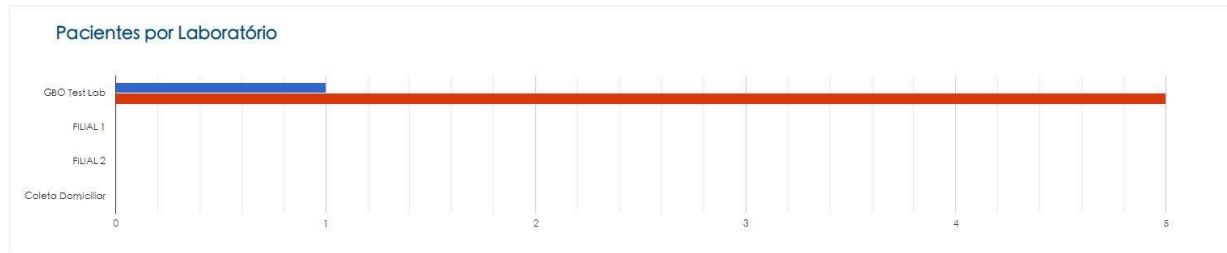

### Tempo médio por paciente

Tempo médio de leitura dos tubos por paciente em todos os laboratórios.

Média: 46s / Meta: 37.50s

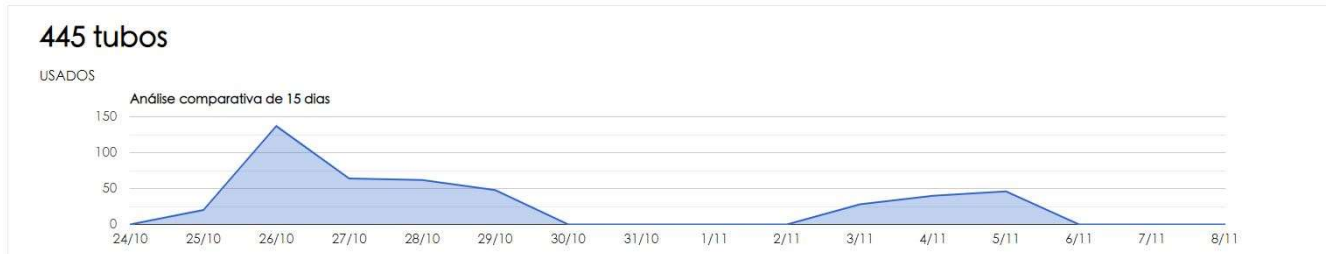


Gráfico indicando quantidade de pacientes por laboratório, tempo médio para coletas realizadas e análise de uso de tubos por período

**MAIS CONTROLE  
E SEGURANÇA  
DA INFORMAÇÃO  
NA HORA DO EXAME.**

*Uso do APP em Computador*



greiner BIO-ONE  
eTRACK

## Passo a passo




greiner BIO-ONE  
eTRACK

- Fazer o download através da pagina [www.gboetrack.com.br](http://www.gboetrack.com.br)
- Seguir os passos de instalação
- Clicar no ícone “GBO eTrack” para abrir o APP em seu Computador
- Digitar seu usuário e senha

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

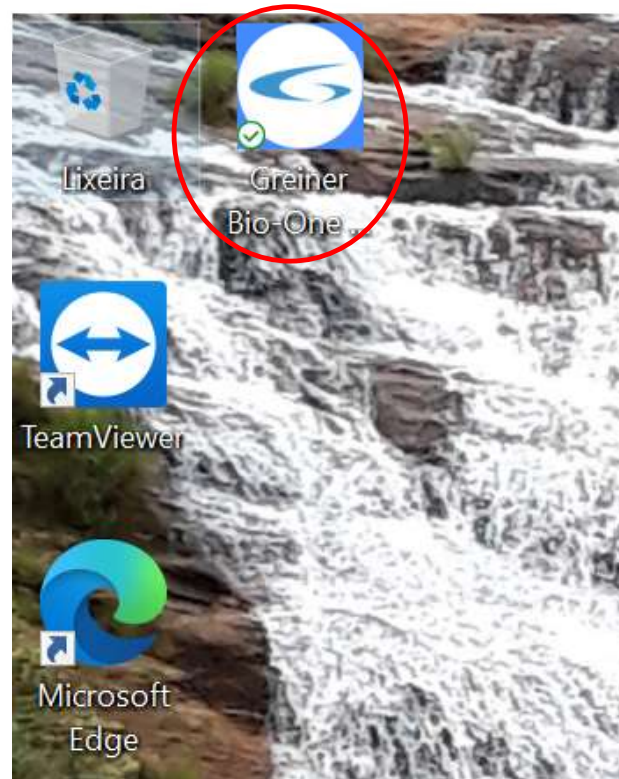

Ícone do GBO  
eTrack

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

greiner BIO-ONE  
eTRACK

Entrar

Para se cadastrar, por favor entrar em contato com seu gestor

Digite seu usuário

greiner BIO-ONE  
eTRACK

Entrar

Para se cadastrar, por favor entrar em contato com seu gestor

Digite sua senha



## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

greiner BIO-ONE  
eTRACK


Usuário

Senha

Entrar

Para se cadastrar, por favor entrar em contato com seu gestor

Clique aqui para começar

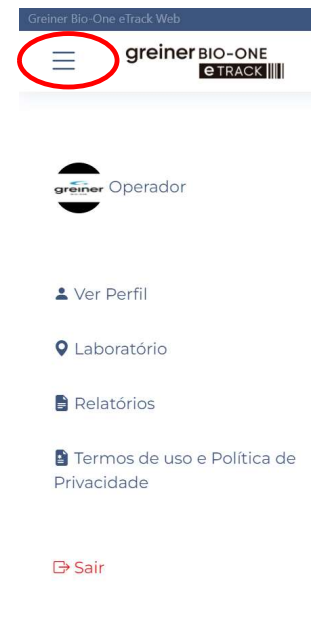

Clique aqui para acessar a barra de menu do App

# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Aqui você pode ver seu perfil

Alterar Foto

greiner

Usuário:

E-mail:

Laboratório:

Senha:

Contato:

Salvar Alterações

No seu perfil você pode editar suas informações e adicionar uma foto


# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Aqui você pode ver as informações do laboratório

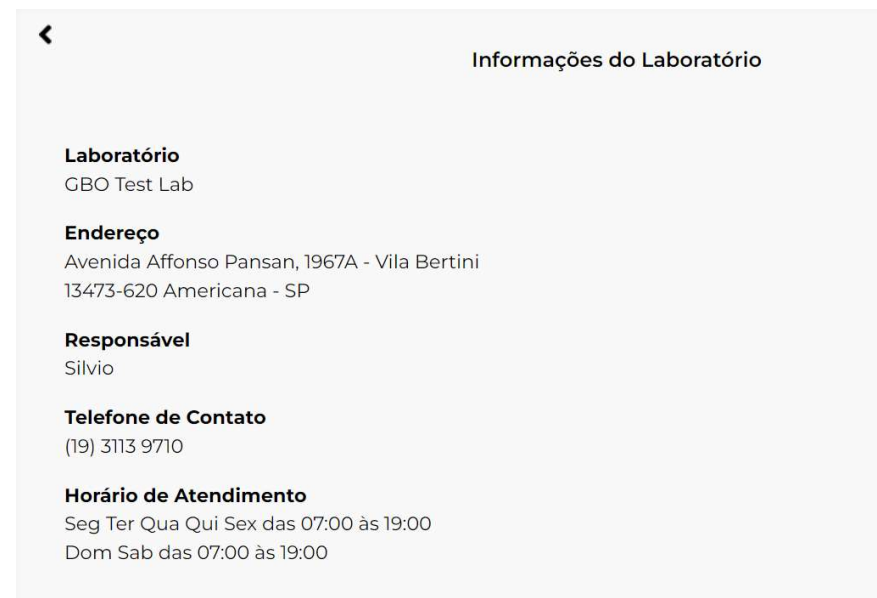

Informações do laboratório

# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Relatórios

Enviados

Pesquisar

	Data	Hora	ID do paciente	ID do tubo	Editar
✓	17/05/2022	14:44	18851490202	454107BR   454036BR   454321BR	
✓	17/05/2022	14:43	18851490202	454036BR   454321BR   454321BR	
✓	17/05/2022	14:43	AY3X1A1AU9	454107BR   454036BR   454321BR	

Aqui você pode ver os relatórios, a mesma função do botão no menu principal

Você pode ver os relatórios dos pacientes enviados e pendentes


# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Aqui você pode ver o Termos de Uso e Política de Privacidade

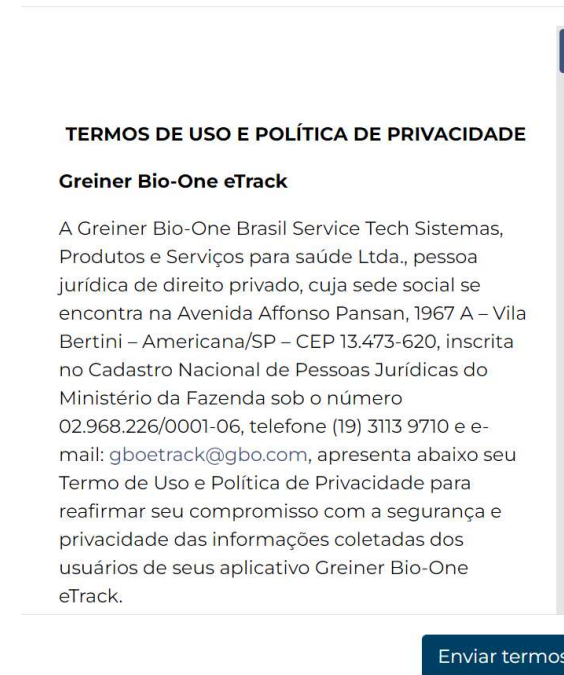

Termos de Uso e Política de Privacidade


## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK



Clique aqui para efetuar a leitura do ID do paciente

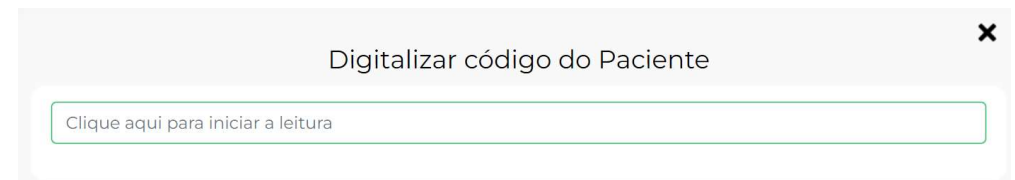

Efetuar a leitura do ID do paciente utilizando o leitor de código de barras

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

Digitalizações

18851490202

Digitalizar códigos

Digitalizar Itens

18851490202

Pronto para iniciar a leitura

Lista de códigos digitalizados

Após confirmar o ID do paciente clique aqui

Efetuar a leitura dos materiais com o leitor de código de barras

# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

Digitalizar Itens

18851490202

Pronto para iniciar a leitura

Lista de códigos digitalizados

- 454107BR - Tubo para Transporte de Amostra VACUETTE®, 4 ml, transparente, 13x75, tampa branca, anel preto, sem aresta
- 454321BR - Tubo para Coagulação VACUETTE®, 2 ml, 9NC, citrato de sódio 3,2%, 13x75, tampa azul, anel branco, tubo sanduíche, PREMIUM
- 454036BR - Tubo de EDTA K3 VACUETTE®, 4 ml, K3E, 13x75, tampa roxa, anel preto, PREMIUM

Reiniciar

Enviar

Para enviar as  
informações

Digitalizar Itens

18851490202

Pronto para iniciar a leitura

Lista de códigos digitalizados

- 454107BR - Tubo para Transporte de Amostra VACUETTE®, 4 ml, transparente, 13x75, tampa branca, anel preto, sem aresta
- 454321BR - Tubo para Coagulação VACUETTE®, 2 ml, 9NC, citrato de sódio 3,2%, 13x75, tampa azul, anel branco, tubo sanduíche, PREMIUM
- 454036BR - Tubo de EDTA K3 VACUETTE®, 4 ml, K3E, 13x75, tampa roxa, anel preto, PREMIUM

Reiniciar

Enviar

Para reiniciar o  
processo clique aqui



## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

Avalie sua experiência conosco:



Ruim



Mediana



Boa



Ótima

◀ Confirmar

Ao término de cada processo, logo após clicar em enviar, opcionalmente pode ser efetuada a avaliação

# Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

	Data	Hora	ID do paciente	ID do tubo
✓	17/05/2022	14:55	18851490202	454036BR   454321BR   454107BR

Editar



✓

Data 17/05/2022

Hora 14:55

3 itens ID do paciente 18851490202

---

454036BR  Utilizado

C210234E  Descartado

Não utilizado

---

454321BR  Utilizado

Enviar alteração

Para editar os tubos, basta ler novamente o código de barras com o ID do paciente e clicar em “Editar”.

Na edição é possível informar se o tubo foi descartado ou não usado

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

✓  
Data 17/05/2022  
Hora 14:55  
3 itens ID do paciente 18851490202

454036BR  
C210234E  
 Utilizado  
 Descartado  
 Não utilizado

454321BR  
 Utilizado

Enviar alteração

### Relatórios

	Data	Hora	ID do paciente	ID do tubo	Editar
✓	17/05/2022	14:55	18851490202	454036BR   454321BR   454107BR	
✓	17/05/2022	14:44	18851490202	454107BR   454036BR   454321BR	
✓	17/05/2022	14:43	18851490202	454036BR   454321BR   454321BR	

Após informar os Descartados e não utilizados, clicar aqui para finalizar o processo e enviar


Acessando os relatórios, selecionar o paciente para visualizar as leituras

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

Exemplo de  
etiqueta 2D no  
tubo (UDI)

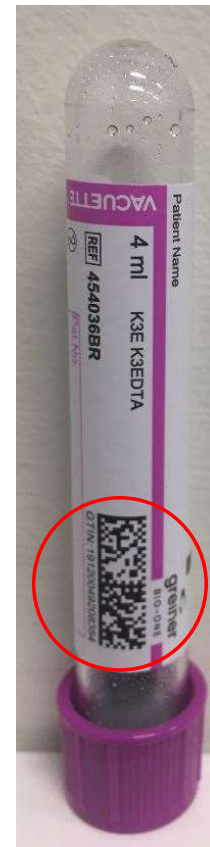

## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

- 1 - Ler o código com o ID do paciente
- 2 - Ler o código da caixa da agulha
- 3 - Ler o código da etiqueta do tubo
- 4 - Se o código da etiqueta não for aceito, clique em “OK” para ler outra etiqueta
- 5 - Se a leitura do código da etiqueta é de um “lote valido”
- 6 - O APP captura a informação da etiqueta e segue para próxima leitura de tubos
- 7 - Clicando em “Terminar”, você encerra o processo de leitura
- 8 - Clicando em “Enviar”, o APP irá enviar a informação coletada (com pesquisa\*)
- 9 - Após o passo 8 você pode iniciar outro paciente

\* Opcional


## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

### *Box de coleta*

Com a utilização de dispositivos individuais, cada operador pode efetuar a leitura dos códigos nos tubos diretamente no box de coleta.

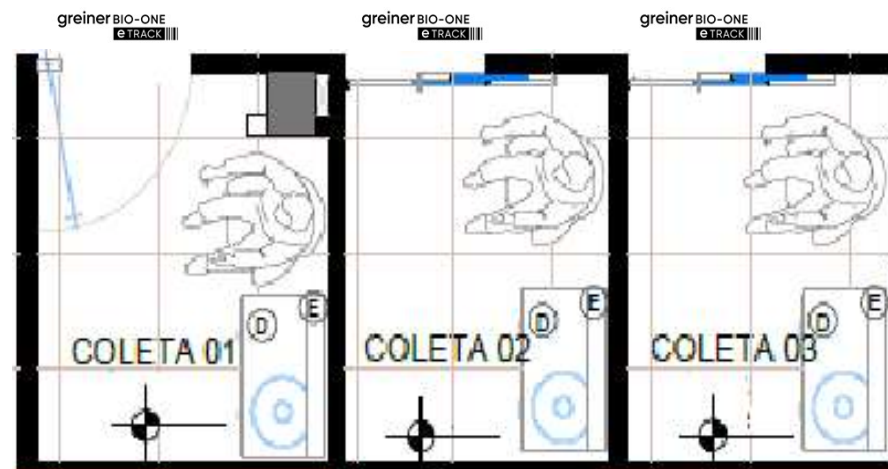


## Passo a passo



greiner BIO-ONE  
eTRACK

### *Hub de coleta*

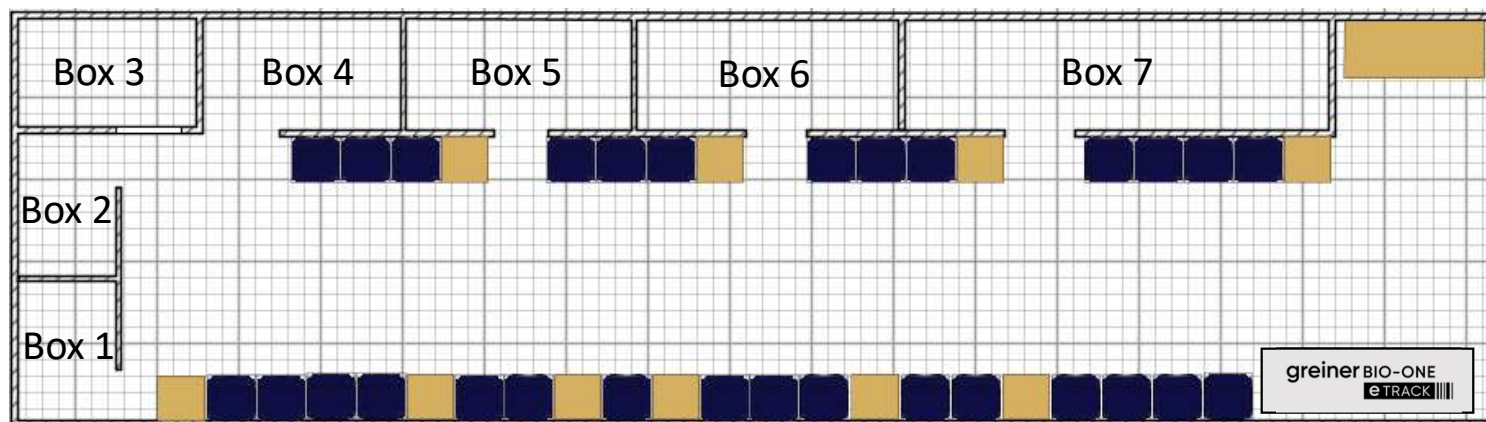

Com a utilização de um único dispositivo, podemos configurar um HUB podendo efetuar a leitura dos códigos nos tubos, preparando assim os kits para coleta.

making a difference

*Agradecemos por sua parceria*

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

**GREINER BIO-ONE**

Americana - São Paulo - Brasil

Telefone: +55 19 3468-9600

[info@br.gbo.com](mailto:info@br.gbo.com)



  
**greiner**  
BIO-ONE